


Teste antigen që mund të bëhen vetë për nxënësit e nxënëset

Fute 2 cm thellë në hundë dhe rrotulloje!
I shkurtër dhe pa dhimbje! Rezultati për 15 minuta!

Çfarë na duhet?



Testi

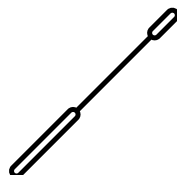


Shkopi me tamponin



Solucioni




Si funksionon?

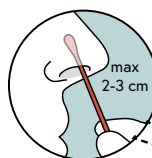


Hapi 1:

- Fute tamponin VETËM 2 cm në vrimën e hundës
- Rrotulloje tamponin 5 herë
- Fute në vrimën tjetër, përsërite rrotullimin

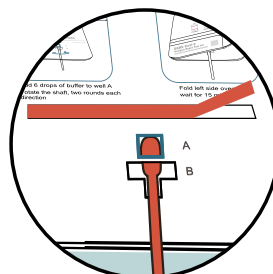


Hapi 2:

- Hiqe mbulesën mbrojtëse të shiritit ngjites dhe fute tamponin në vrimë

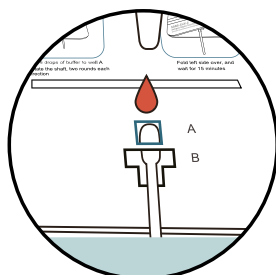

Hapi 3:

- Hidh 6 pika nga solucioni në gropëzë dhe rrotulloje tamponin 2 herë në secilin drejtim, djathtas e majtas

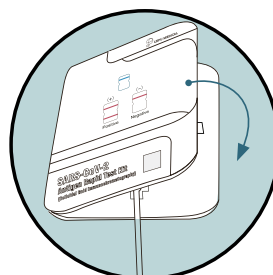

Hapi 4:

- Ngjite anën e majtë me të djathtën
- Rezulati i testit del pas 15 minutash



Hapi 5:

- Rezultati i testit është pozitiv:
Në shtëpi: kontaktoni 1450
Në shkollë: Drejtorja e shkollës informon 1450 ose Institucionin Shëndetësor lokal
- Testi është negativ:
Vazhdo të jesh i shëndoshë dhe të shkosh në shkollë