


Teste antigen individuale pentru eleve si elevi

Rotiti tamponul în nas la o adâncime de numai 2 centimetri!
Scurt si fără dureri! Rezultatul în 15 minute!

De ce aveti nevoie?



Card de testare

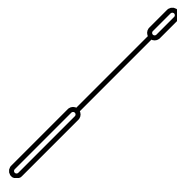



Betisor cu tampon



Solutie




Cum funcționează testul?

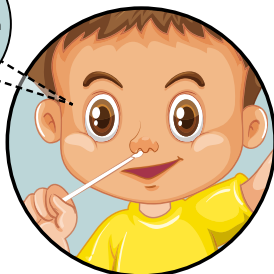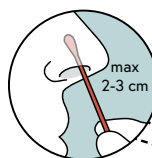


Pasul nr. 1:

- Introduceți tamponul NUMAI 2 centimetri în cavitatea nazală
- Rotiti tamponul de 5 ori într-un cerc
- Schimbati cavitatea nazală, repetați rotirea

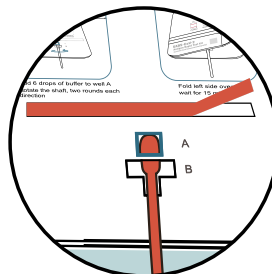


Pasul nr. 2:

- Îndepătați învelisul de protecție al benzii adezive și împingeți proba în orificiu

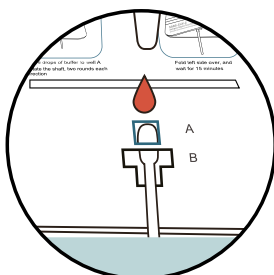

Pasul nr. 3:

- Aplicați 6 picături din soluție în cavitate și rotiti tamponul de 2 ori în fiecare direcție

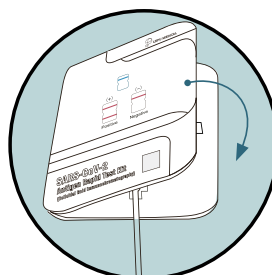

Pasul nr. 4:

- Lipiți partea stângă cu partea dreaptă
- Rezultatul testului apare în 15 minute



Pasul nr. 5:

- Rezultat pozitiv:
acasă: contactați 1450 în școală: conducerea școlii informează 1450 sau autoritatea sanitară locală
- Rezultat negativ:
Rămâneți sănătoși și mergeți mai departe la școală